



RYCHLÝ PRŮVODCE - Čeština


eFOLDi 

Rozložení elektrického křesla eFOLDi

Před zahájením umístěte křeslo na volné prostranství mimo dosah domácích zvířat a malých dětí.

Rozkládání je jednoduché a s trochou cviku ho zvládnete nastavit během několika sekund.

Než se poprvé vydáte ven, doporučujeme vám procvičit si s křeslem Power Chair.

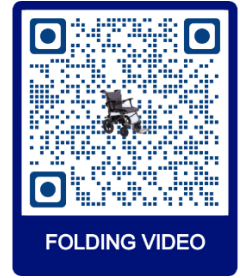

1 Kolečka proti převrácení a nabíječka baterií jsou součástí dodávky vašeho křesla Power Chair.

2 Namontujte kola proti převrácení. Ty se jednoduše stisknou a zajistí na místě.

3 Elektrickou židli rozložte jednoduchým zatlačením spodní části sedadla dolů a zatažením za uvolňovací páčku nahoru.



4 Nainstalujte podpěry loketních opěrek do štěrbin a zatlačte je dolů, dokud se nezajistí.
Udržujte kabely mimo místa sevření

5 Vezměte řídicí jednotku a tyč a.

6 - vložte ovládací tyč do úchytu pod loketní opěrkou.



7 upravte polohu ovladače a utáhněte ryhovaným knoflíkem.

8 - Vyměňte ovládání obsluhy ze zadní kapsy a připevněte jej k tyči vzadu.

9 Stáhněte opěrku nohou dolů.



10 Nainstalujte podsedáky podle obrázku. Ty jsou drženy na místě pomocí suchých zipů. Ujistěte se, že jsou složeny přes opěradlo a pod sedadlem.

11 Vložte baterie, dokud nezaklapnou na místo.
Vaše křeslo Power Chair je nyní připraveno.

12 Zapněte křeslo Power Chair stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ. Úplné informace naleznete v příručce.

Skládací elektrické křeslo eFOLDi

		
<p>1 Vypněte napájení pomocí tlačítka POWER na ručním ovladači. Pokud křeslo nepoužíváte, vždy vypněte napájení, abyste šetřili energii baterie.</p>	<p>2 Mírně povolte rýhovaný knoflík a vyjměte ovladač. Umístěte ovladač a bezpečnostní pás na podložku sedadla. Znovu utáhněte knoflík, abyste zabránili ztrátě.</p>	<p>3 Odstraňte ovládací obsluhu a vložte je do kapsy na zadní straně židle.</p>
		
<p>4 Zkontrolujte, zda jsou přední kola umístěna dopředu, aby bylo zajištěno hladké skládání. <i>Tipem zatáhněte za židli dozadu, abyste vyrovnali kola</i></p>	<p>5 Sáhněte pod okraj sedadla a vytáhněte uvolňovací tyč nahoru, abyste uvolnili sedadlo a...</p>	<p>6 Vytáhněte sedadlo nahoru a směrem k sobě, abyste složili elektrické křeslo. Sklopte opěrku nohou.</p>

Nabíjení baterie eFOLDi Power Chair

		
<p>Chcete-li nabíjet křeslo Power Chair, zapojte kabel nabíječky do základny joysticku a připojte zástrčku AC do elektrické zásuvky. Tím se nabijí OBĚ baterie současně.</p>	<p>Pro vyjmutí baterii pro cestování nebo individuální nabíjení stiskněte červený jazyček nahoru a posuňte baterii dozadu.</p>	<p>Baterie lze nabíjet odděleně od křesla pomocí krátkého „pigtailového“ adaptéru, který je třeba nejprve připojit ke kabelu nabíječky.</p>

Provoz elektrického křesla eFOLDi

		
<p>Ovladač sluchátka má tlačítka pro nastavení rychlosti a displeje indikující zbývající energii a nastavení rychlosti. Reverzní sírenu můžete deaktivovat stisknutím</p>	<p>Nabíjecí port pro vaše křeslo Power Chair se nachází pod sluchátkem pro nabíjení OBOU baterii současně. K dispozici je také USB zásuvka pro napájení telefonu nebo jiného USB zařízení.</p>	<p>Ovládací spojovatele lze nastavit tak, aby upravilo rychlost chůze pro obsluhu/pečovatele a také poskytuje kontrolu baterie. Páka ovládá pohyb vzad nebo vpřed.</p>

Upozorňujeme, že tento leták má sloužit pouze jako rychlý průvodce. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce k produktu.

Jakékoli dotazy, zavolejte nám na číslo 0800 915 0800 nebo napište e-mail hello@efoldi.com