



## HURTIGGUIDE – NORSK




eFOLDi

### Utfolding av eFOLDi Lite Scooter

Før du starter, stå scooteren oppreist på et åpent sted unna kjæledyr og små barn.

Å folde ut sparkesykkelen er grei og med litt øvelse vil du kunne sette den opp på sekunder.

Vi anbefaler deg å øve med scooteren før du begir deg ut for første gang.

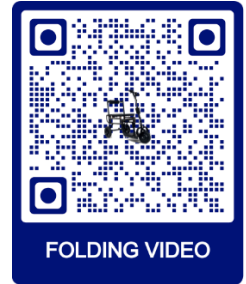

1

Slipp den gule rattstammelåsen...



2

...og la søylen svinge fritt.



3

Trekk styret ut og oppover...



4

...til de låser seg i en vertikal linje.



5

Finn en liten gul bryter på siden og trekk for å frigjøre forhjulseneheten



6

Hold rattstammen og seteryggen og trekk dem fra hverandre...



7

...scooteren vil utfolde seg når du trekker seteryggen og rattstammen fra hverandre og...



8

... scooteren låser seg selv i åpen posisjon.



9

Sørg for at låselåsene er låst til stålstangen...



10

...hvis ikke trykker du foten ned på fotplaten for å låse scooteren åpen.



11

Hvis det ikke allerede er installert, påfør seteputene og seteryggen som vist



12

Kontroller at magnetbremsen er i LÅST posisjon for å koble inn motoren.

## Sammenlegging av eFOLDi Lite Scooter

					
1	Fell seteryggen ned til setebunnen.	2	vis scooteren har armlener, trekk den svarte bryteren for å løsne, og brett deretter ned ryggstøtten i henhold til (1)	3	Trykk og hold den lille gule låsen på rattstammen...
					
4	...og brett kolonnen ned til den låses av magnetlåsen.	5	Hold scooteren godt i rattstammen og bærehåndtaket, og press kolonnen ned mot fotplaten	6	Vipp scooteren tilbake i en vinkel og bruk foten bak rattet for å hindre at den beveger seg bort fra deg
					
7	...trykk innover på rattstammen til forhjulet låses på plass...	8	...og rattstammelåsen låses i posisjon.	9	Trykk inn rattstammen for å låse den tett mot rammen.

## eFOLDi Lite - Operasjon

		
For å slå på scooteren, trykk på den grå knappen under batteridisplayet. Velg (D) Kjør eller (R) Revers og trykk på tommelgasspaken for å gå.	Batteriet kan lades ved hjelp av ladeporten som vist. Lad alltid batteriet så snart som mulig som mulig når skjermen er indikerer rav.	Batteriet kan fjernes ved å løfte låsen og løfte batteriet oppover. Etter fjerning kan batteriet lades ved hjelp av kontakten på siden av batteriet.

Vær oppmerksom på at dette pakningsvedlegget kun er ment som en hurtigveiledning. For fullstendige instruksjoner, vennligst se vår brukerhåndbok. Eventuelle spørsmål, vennligst ring oss på 0800 915 0800 eller e-post [hello@efoldi.com](mailto:hello@efoldi.com)