



## SNABB GUIDE – SVENSKA





eFOLDi 

### Fäll ut eFOLDi Lite Scooter

Ställ skotern upprätt innan du startar i ett öppet utrymme borta från husdjur och små barn.

Att fälla ut skotern är enkelt och med lite övning kommer du att kunna ställa in den på några sekunder.

Vi råder dig att träna med skotern innan du ger dig ut för första gången.

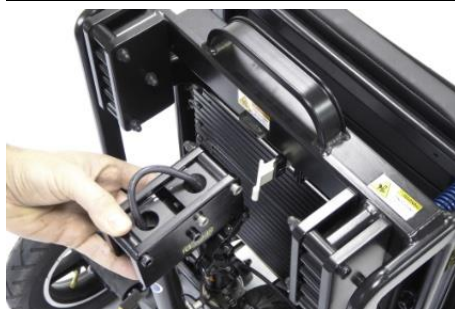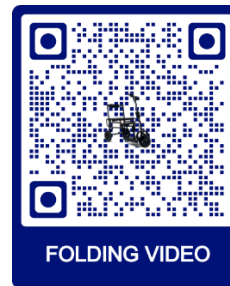

**1** Lossa rattstångens spärr...

**2** ...och låt pelaren svänga fritt.

**3** Dra ut styret och uppåt...



**4** ...tills de låser sig i en vertikal linje.

**5** Leta reda på det lilla gula stoppet på sidan och dra för att frigöra framhjulsenheten.

**6** Håll i rattstången och ryggstödet och dra isär dem...



**7** ...skotern fälls ut när du drar isär ryggstödet och rattstången och ...

**8** ...skotern låser sig själv i sitt öppna läge.

**9** Se till att låsspärrarna har låst till stålstången...



**10** ...om inte tryck ner foten på fotplattan för att låsa skotern öppen.

**11** Om det inte redan är installerat, applicera sittydynorna och ryggstödet enligt bilden.

**12** Kontrollera att magnetbromsen är i **LÅST** läge för att koppla in motorn.

## Fällning av eFOLDi Lite Scooter

					
<b>1</b>	Fäll ner ryggstödet till sätesbotten.	<b>2</b>	Tryck och håll den lilla gula spärren på rattstängan...	<b>3</b>	och vik ner kolonnen tills...
					
<b>4</b>	...den låses av magnetspärran.	<b>5</b>	Håll scootern stadigt i rattstängan och bärhandtaget och tryck ner pelaren ordentligt mot fotplattan	<b>6</b>	Tippa skotern bakåt i en vinkel och använd foten bakom ratten för att stoppa den från dig
					
<b>7</b>	...tryck inåt på rattstängan tills framhjulet låser på plats...	<b>8</b>	...och rattstängsspärren låses i läge.	<b>9</b>	Tryck in rattstängan för att låsa den tätt mot ramen.

## eFOLDi Lite-drift

		
Batteriet kan tas bort genom att lyfta spärren och lyfta uppåt. Det finns en laddningspunkt på sidan av batteriet.	För att starta skotern, tryck på den grå knappen under batteridisplayen. Välj (D) Drive eller (R) Reverse och tryck på tumgasreglaget för att gå. <b>Ladda alltid batteriet så snart som möjligt som möjligt när displayen är indikerar bärnsten.</b>	För att förvandla skotern till ett rullande bagage, se till att den vertikala rattstängan är låst mot rattstängens spärr.