



## SNABB GUIDE – SVENSKA




eFOLDi

### Fäll ut eFOLDi Elstol

Innan du börjar placera elstolen på ett öppet utrymme borta från husdjur och små barn.

Utvecklingen är enkel och med lite övning kommer du att kunna ställa in den på några sekunder.

Vi rekommenderar att du tränar med elstolen innan du ger dig ut för första gången.

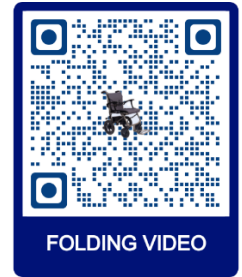

**1** Tippskydd och batteriladdare medföljer din elstol.

**2** Montera tippskyddshjulen. Dessa trycks helt enkelt och låses på plats.

**3** Fäll ut elrullstolen genom att helt enkelt trycka ned sätets botten samtidigt som du drar frigöringsspaken uppåt.



**4** Montera armstöden i spåren och tryck ner dem tills de låses. **Håll kablarna borta från klämpunkter**

**5** Ta kontrollenheten och staven och...

**6** ...för in styrstängens i armstödsbeslaget under armstödet...



**7** Justera reglagets läge och dra åt med den räfflade vreden.

**8** Ta bort assistentkontrollen från bakfickan och fäst den på stängens baktill.

**9** Dra ner fotstödet.



**10** Montera sittdynor enligt bilden. Dessa hålls på plats av kardborreband. Se till att dessa fälls över ryggsätet och under sitsen.

**11** Sätt i batterierna tills de klickar på plats. Din elstol är nu klar.

**12** Slå på elstolen genom att trycka på POWER-knappen. Se din manual för fullständig information.

## Fällning av elstolen eFOLDi

		
<p><b>1</b> Stäng av strömmen med POWER-knappen på handkontrollen. <b>Stäng alltid av strömmen när stolen inte används för att spara på batteriet.</b></p>	<p><b>2</b> Lossa den räfflade vredet något och ta bort kontrollenheten och säkerhetsbälte på sätesdynan. <b>Dra åt vredet igen för att förhindra förlust.</b></p>	<p><b>3</b> Ta bort åtkomstkontrollen och placera den i fickan på baksidan av stolen.</p>
		
<p><b>4</b> Kontrollera att framhjulen är placerade framåt för att säkerställa smidig hopfällning. Dra stolen bakåt med spets för att rikta in hjulen</p>	<p><b>5</b> Nå under kanten av sätet och dra frigöringsstängningen uppåt för att frigöra sätet och...</p>	<p><b>6</b> ...dra sätet uppåt och mot dig för att fälla ihop elrullstolen. Fäll in fotstödet.</p>

## eFOLDi Elstol Batteriladdning

		
<p>För att ladda elstolen anslut laddarkabeln till styrspakens bas och anslut AC-kontakten till ett eluttag. Detta kommer att ladda BÅDA batterierna samtidigt.</p>	<p>För att ta bort batterier för resa eller individuell laddning, tryck den röda fliken uppåt och skjut batteriet bakåt.</p>	<p>Batterier kan laddas separat från stolen genom att använda den korta 'pigtail'-adaptorn som måste anslutas till laddarens kabel först.</p>

## eFOLDi Elstol Drift

		
<p>Handenhetens kontroller har knappar för att justera hastighet och displayer för att indikera återstående effekt och hastighetsinställning. Du kan inaktivera reverseringsljudet genom att trycka på knappen som anges.</p>	<p>Laddningsporten för din elstol finns under luren för att ladda BÅDA batterierna samtidigt. Det finns också ett USB-uttag för att driva en telefon eller annan USB-enhet.</p>	<p>Ledarkontrollen kan ställas in för att justera gånghastigheten för en skötare/vårdare och ger även en batterikontroll. Spaken styr rörelse bakåt eller framåt.</p>